

Limpiador de lengua

Descripción:

Está diseñado para ayudar a eliminar la placa dental, los restos de alimentos y las bacterias de la superficie de la lengua, evitando así su crecimiento y ayudando a combatir el mal aliento.

Características:

- Arcos de limpieza suaves y contorneados diseñados para la comodidad.
- Mango flexible antideslizante de goma para un mejor control.
- Su uso diario aporta una sensación refrescante continua durante todo el día.

Instrucciones:

Coloque el limpiador en la parte posterior de la lengua. Tire suavemente del mango hacia adelante, rozando los arcos a través del surco de la lengua. Enjuáguese el limpiador y la boca. Repetir el proceso al menos una vez al día.

Presentación:

Descripción	Tamaño	Color	EAN 13	Contenido
Limpiador de lengua	17,8 cm largo 3,6 cm ancho	Blanco + azul Blanco + verde	8435454001556	1u/ expositor, 12 expositores/paquete, 12 paquetes/Ctn.

Material:

PP: 62%

TPR: 38%

Almacenamiento:

Allmacenar en lugares secos. No exponer a la luz solar directa, provocando altas temperaturas.



***Quality Products for a healthy life!**

KL MED SANITECH SOLUTIONS S.L

CIF: B87292751

Av. De las Morcilleras 33

28343 Valdemoro (Madrid) – España

Tel: +34-913 892 300

+34-913 892 301


Limpiador de lengua

EAN 13	Ref.
8435454001556	001556



Expositor:

Presentación: 12 unidades/paquete

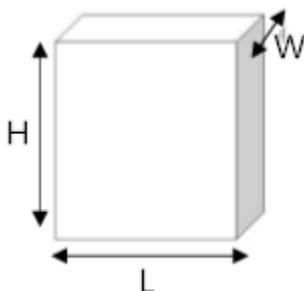

Cartón:

Presentación: 12 paquetes/Ctn.

Tamaño de cartón:

45cm(L)x26,5cm(W)x26cm(H)



***Quality Products for a healthy life!**

KL MED SANITECH SOLUTIONS S.L

CIF: B87292751

Av. De las Morcilleras 33

28343 Valdemoro (Madrid) – España

Tel: +34-913 892 300

+34-913 892 301